


Neue Twist-  
Formen

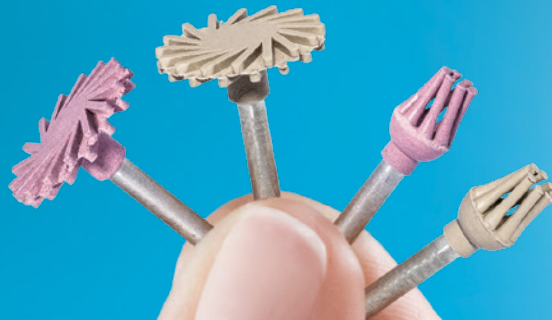

## Venus® Supra Brillant polierter Glanz.

Eine lang anhaltende, natürliche Ästhetik ist die Stärke von Venus Supra. In nur zwei Arbeitsschritten verleiht unser Poliersystem fertigen Komposit-Restorationen ein brillantes Finish und strahlenden Hochglanz.

Weitere Vorteile, die Venus Supra bietet:

- » **Zwei neue Twist-Formen glänzen durch Effizienz, Flexibilität und Langlebigkeit.** Die Twist Disc eignet sich ideal zur Politur verschiedener Kompositoberflächen, während die Twist Brush bei tiefen Fissuren (z. B. auf Okklusalfächen) perfekte Polierergergebnisse erzielt.
- » **Bedarfsorientierte Nachbestellung:** Vor- und Hochglanzpolierer können ab sofort separat bestellt werden. So lassen sich Lagerhaltung und Nachbestellzyklen in der Praxis optimieren.

Mundgesundheits in besten Händen.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# Venus® Supra:

Das Poliersystem für lang anhaltenden Hochglanz

- Zwei-Schritt-Poliersystem, bestehend aus Vorpolierern und Hochglanzvarianten in 5 unterschiedlichen Formen
- Hergestellt aus mit mikrofeinem Diamantpulver hochgefülltem Silikon
- Universelle Lösung für alle Front- und Seitenzahnrestaurationen für ästhetischen Glanz und glatte Oberflächen
- Speziell zugeschnitten auf Venus-Komposite wie z. B. Venus Diamond ONE und Venus Pearl ONE
- Autoklavierbar und wiederverwendbar

## Neue Twist-Formen

- Die modernen Formen passen sich flexibel der Zahnmorphologie an und ermöglichen eine schnelle und effektive Politur. Durch ihre Flexibilität und intuitive Handhabung wird eine übermäßige Druckausübung verhindert – dies dient u. a. der Langlebigkeit.

## Neue Refills

- Vor- und Hochglanzpolierer werden ab sofort in separaten Refills angeboten, da deren Verbrauch unterschiedlich ist. Diese bedarfsorientierte Bestellmöglichkeit optimiert Nachbestellzyklen und Lagerhaltung in der Praxis.



Ulf Krueger-Janson

„Ich verwende Venus Supra Polierer bereits seit über 13 Jahren. Sie sind nahezu unverwundlich und erzielen den mit Abstand besten Hochglanz. Einfach hervorragend!“

Die Twist Disc ist vielseitig einsetzbar und erzielt optimale Polierresultate auf verschiedenen Kompositoberflächen



Okklusal

Inzisal



Labial

Bukkal




Lingual

Interdental

Die Twist Brush erzielt hervorragende Poliererergebnisse mit einfachem Zugang zu tiefen Fissuren.




Perfekte Ergebnisse bei der Politur in Fissuren: Twist Brush

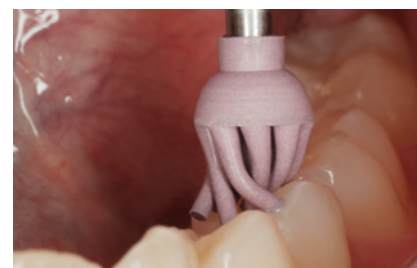

Die Borsten der Twist Brush sind flexibel biegsam, sodass Fissuren gut zugänglich sind.

## Ausgezeichnete Polierresultate mit Venus Supra

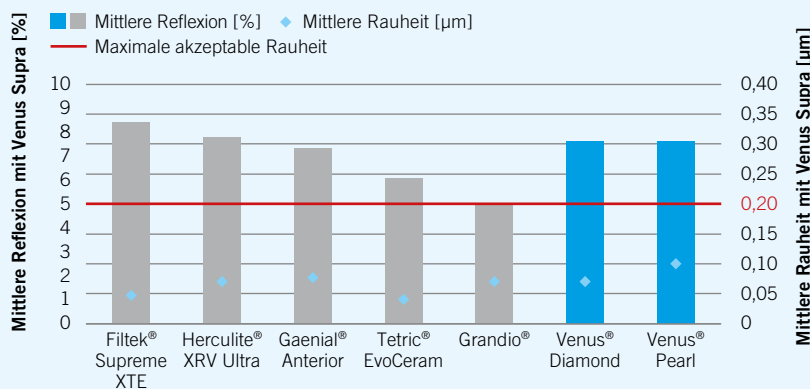

Artikel-Nr.	Artikel	Inhalt
<b>Intro Kit</b>		
66087541	Venus Supra Intro Kit 2x5	1 Vor- und 1 Hochglanzpolierer jeder Form (Flamme, Kelch, große Flamme, Twist Brush, Twist Disc)
<b>Neue Formen</b>		
66093899	Venus Supra Refill Pre Twist Disc	10 Vorpolierer der Form „Twist Disc“
66093900	Venus Supra Refill Gloss Twist Disc	10 Hochglanzpolierer der Form „Twist Disc“
66093901	Venus Supra Refill Pre Twist Brush	10 Vorpolierer der Form „Twist Brush“
66093902	Venus Supra Refill Gloss Twist Brush	10 Hochglanzpolierer der Form „Twist Brush“
<b>Neue Refills</b>		
66093893	Venus Supra Refill Pre Cup	10 Vorpolierer der Form „Kelch“
66093894	Venus Supra Refill Gloss Cup	10 Hochglanzpolierer der Form „Kelch“
66093895	Venus Supra Refill Pre Flame	10 Vorpolierer der Form „Flamme“
66093896	Venus Supra Refill Gloss Flame	10 Hochglanzpolierer der Form „Flamme“
66093897	Venus Supra Refill Pre Large Flame	10 Vorpolierer der Form „Große Flamme“
66093898	Venus Supra Refill Gloss Large Flame	10 Hochglanzpolierer der Form „Große Flamme“

[kulzer.de/venus](http://kulzer.de/venus)  
[kulzer.de/ONE](http://kulzer.de/ONE)